



ONDERHOUD

ACHTER HET OOR HOORTOESTEL MET MAATSTUKJE

Uw hoortoestel komt dagelijks in contact met stof, vocht en bacteriën. Voor een optimale werking is het belangrijk om dagelijks uw hoortoestel te reinigen. Dit vraagt slechts enkele minuten tijd.

Kom elke drie maanden langs voor een grondige reiniging. Zo kunnen we u een goede geluidskwaliteit en optimaal gebruik van uw toestel garanderen. U kan hiervoor online een afspraak maken, zo hoeft u niet te wachten.

1. Schoonmaken

Bij Hoorcentrum Aerts vindt u reinigingsdoekjes die gemaakt zijn om hoortoestellen proper te maken en te desinfecteren zonder de kleur van uw hoortoestel aan te tasten. Neem een doekje uit de doos, ga ermee over uw hoortoestel en verwijder het zichtbare vuil.



VOCHTIGE DOEKJES
Doekjes om uw hoortoestel schoon te maken.



REINIGINGSVLOEISTOF
Breng op een doekje aan en maak uw hoortoestel schoon.

2. Vrijmaken van de geluidsweg: reinigen van het oorstuk




REINIGINGSDOOSJE
Om uw oorstuk te reinigen.




BLAASPEER
Om uw oorstuk droog te blazen na reiniging.


Reinig uw oorstuk wekelijks grondig.

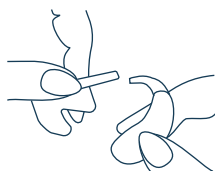

Neem het oorstukje van het hoortoestel.

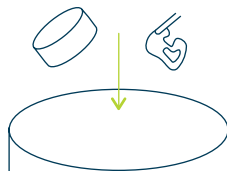

Vul de beker met lauw water en leg het reinigingstablet en het oorstuk er gedurende een half uur in.

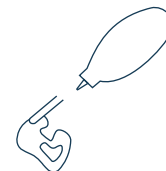

Blaas het oorstuk droog met een blaaspeertje.



3. Drogen

Wanneer u uw hoortoestel draagt, wordt het blootgesteld aan vocht, zoals regen en zweet. Een hoortoestel bestaat grotendeels uit elektronica, daarom is het van essentieel belang dat dit niet vochtig wordt. Om ervoor te zorgen dat uw hoortoestel in optimale conditie blijft, is het raadzaam om het elke avond te drogen. Dit kan met een droogtablet of een droogbox.



DROOGDOOSJE
Voor het drogen met droogtabletten.



DROOGTABLETTE
Om uw hoortoestel dagelijks te drogen.



DROOGBOX
Elektrisch droogstelsysteem met UV-filter om te desinfecteren.


3.1 Droogbox

Oplaadbare hoortoestellen kunnen met een combinatie-toestel gelijktijdig laden en drogen.

Heeft u een hoortoestel met batterijen?

1. Neem de batterij uit uw hoortoestel.
2. Leg de hoorapparaten in uw droogbox.
3. Duw op de startknop zodat de lampjes erboven branden, de eerste minuten zal er een UV-lampje de bacteriën op uw toestel verwijderen. Daarna zal door de circulatie van warme lucht het vocht verdampen.


3.2 Droogtablet

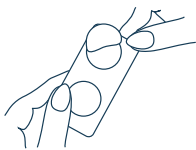

Neem uw droogtablet uit de verpakking. Zorg ervoor dat het kartonnetje steeds gesloten blijft.



Heeft u geen oplaadbaar hoortoestel? Neem dan de batterij uit uw hoortoestel.

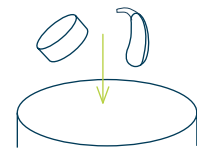

Leg de tablet en uw hoortoestel in een droogdoosje of lader van uw hoortoestel. Sluit uw doosje of lader goed. Laat dit een hele nacht liggen. Vervang de droogtablet na een maand, wanneer de kleur wit wordt.